

Frigorifero & Congelatore Liebherr



PROMOTION

SRFvg 4001

Frigorifero da laboratorio con raffreddamento a convezione



PROMO validity
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 2.441,38€
PROMO PRICE 1.630,00€

Trasporto: 62,00€
Trasporto Franco Stradale

Product

Massime prestazioni di refrigerazione e temperature stabili: questo frigorifero da laboratorio è stato progettato per la conservazione di sostanze sensibili, come risulta evidente dalle innovative funzioni di sicurezza e dagli interni facili da pulire.

Dimensioni esterne (altezza / larghezza / profondità)

188,4 / 59,7 / 65,4 cm

Intervallo di temperatura impostabile

+3 °C a +16 °C

Volume lordo totale

394 l


Consumo energetico per anno

245 kWh/a

Volume netto totale

298 l

Caratteristiche

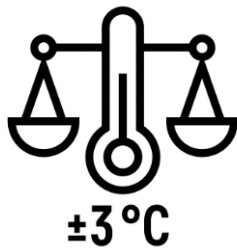

Stabilità della temperatura $\pm 3\text{ °C}$

Per preservare la qualità di sostanze sensibili è necessario che le variazioni di temperatura siano minime. I frigoriferi Liebherr garantiscono una fluttuazione massima dalla temperatura impostata di appena $\pm 3\text{ °C}$. In questo modo non solo si mantiene il clima di conservazione, ma anche il valore della merce immagazzinata.



+2 °C SafetyDevice (limitatore di sicurezza)

Se, a causa di un malfunzionamento, la temperatura scende al di sotto di +2 °C mentre il valore impostato è di +5 °C o superiore, SafetyDevice assume il controllo stabilizzando la temperatura e attivando l'allarme, in modo da impedire il congelamento del contenuto del vano. A temperature più fredde, questa soglia di attivazione diminuisce relativamente con l'impostazione della temperatura.





Interfaccia WiFi/LAN integrabile

Il collegamento in rete di un'apparecchiatura Liebherr è un gioco da ragazzi. Grazie all'interfaccia WiFi e LAN integrabile è possibile collegare facilmente alle apparecchiature sistemi esterni come lo SmartMonitoring di Liebherr. Questa soluzione di monitoraggio digitale consente di controllare e registrare la temperatura di conservazione in tutta comodità e sicurezza tramite l'interfaccia configurata.



Serratura meccanica

Tutte le apparecchiature professionali Liebherr per la conservazione di prodotti sensibili alla temperatura sono dotate di una serratura meccanica con due chiavi. In questo modo potete essere certi che nessuna persona non autorizzata abbia accesso ai prodotti conservati.



Progettate per una durata di 15 anni

La sostenibilità di un'apparecchiatura non è data solo dalla sua efficienza energetica ma anche dalla sua lunga durata. Materiali di alta qualità e una solida lavorazione, insieme ad almeno dieci anni di disponibilità di ricambi, fanno di ogni apparecchiatura Liebherr una macchina robusta, affidabile ed estremamente duratura, in grado di svolgere il lavoro quotidiano più impegnativo in maniera precisa e puntuale.



Interno facile da pulire

L'interno dell'apparecchiatura è in polistirene, un materiale completamente riciclabile, robusto e inodore. Realizzato da un unico pezzo di polistirene, non ha giunzioni in cui può annidarsi la sporcizia; gli angoli ampi si puliscono in maniera semplice e veloce. La combinazione perfetta di sostenibilità e igiene.

PROMOTION

SFFfg 4001

Congelatore da laboratorio
con interno privo di fonti di accensione



PROMO validity
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 2.803,74€
PROMO PRICE 1.871,00€

Trasporto: 71,00€
Trasporto Franco Stradale

Product

Questo congelatore da laboratorio non si limita a garantire temperature costanti per la conservazione di sostanze sensibili, ma vanta anche funzioni di monitoraggio e allarme avanzate. Inoltre, il robusto interno in polistirene è realizzato in un unico pezzo senza giunture, il che lo rende facile e veloce da pulire.

Dimensioni esterne (altezza / larghezza / profondità)

188,4 / 59,7 / 65,4 cm

Intervallo di temperatura impostabile

-9 °C a -30 °C

Volume lordo totale

316 l

Consumo energetico per anno


384 kWh/a

Volume netto totale

190 l




Caratteristiche

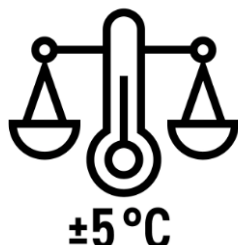

Stabilità della temperatura $\pm 5^{\circ}\text{C}$

La temperatura delle sostanze più sensibili non deve allontanarsi significativamente dalla temperatura di conservazione impostata. I frigoriferi Liebherr garantiscono oscillazioni della temperatura minima non superiori a $\pm 5^{\circ}\text{C}$, proteggendo in modo ottimale il prezioso contenuto delle apparecchiature e preservandone la qualità.

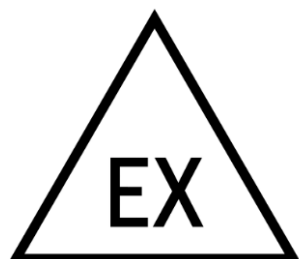

Conformità alla Direttiva ATEX

Le apparecchiature da laboratorio Liebherr sono conformi alle norme EN/IEC 60079-0 o EN-IEC 60079-7 e alla Direttiva UE 2014/34/UE ("Direttiva ATEX"). La classificazione del vano interno <Ex> II 3G Ex ec IIC T6 (dichiarata come Zona 22) le rende adatte alla conservazione di sostanze infiammabili in contenitori chiusi che potrebbero creare atmosfere esplosive.



SmartFrost

Con SmartFrost si riduce notevolmente la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti conservati. Lo sbrinamento è necessario solo raramente, e quando lo è, risulta molto più facile grazie alle pareti interne lisce e facili da pulire. L'evaporatore rivestito da materiale espanso assicura un'alta efficienza energetica e un raffreddamento uniforme.





Interfaccia WiFi/LAN integrabile

Il collegamento in rete di un'apparecchiatura Liebherr è un gioco da ragazzi. Grazie all'interfaccia WiFi e LAN integrabile è possibile collegare facilmente alle apparecchiature sistemi esterni come lo SmartMonitoring di Liebherr. Questa soluzione di monitoraggio digitale consente di controllare e registrare la temperatura di conservazione in tutta comodità e sicurezza tramite l'interfaccia configurata.



Serratura meccanica

Tutte le apparecchiature professionali Liebherr per la conservazione di prodotti sensibili alla temperatura sono dotate di una serratura meccanica con due chiavi. In questo modo potete essere certi che nessuna persona non autorizzata abbia accesso ai prodotti conservati.



Progettate per una durata di 15 anni

La sostenibilità di un'apparecchiatura non è data solo dalla sua efficienza energetica ma anche dalla sua lunga durata. Materiali di alta qualità e una solida lavorazione, insieme ad almeno dieci anni di disponibilità di ricambi, fanno di ogni apparecchiatura Liebherr una macchina robusta, affidabile ed estremamente duratura, in grado di svolgere il lavoro quotidiano più impegnativo in maniera precisa e puntuale.

Fornitore

LIEBHERR



www.microtech.eu

Sede Operativa
Traversa III Pisciarelli 18/a
80078 - Pozzuoli (NA)

Sede Legale
Viale Augusto 162,
80125 - Napoli (NA)

microtech@microtech.eu
microtech.srl@pec.it
+39 800 894 119

