

pHmetro da Banco per Analisi di Laboratorio edge®



PROMOTION 1

pHmetro Versatile da Banco e Portatile per Analisi di Laboratorio edge®

HI2002 della serie edge® è un pHmetro da banco per laboratori d'analisi e industrie alimentari. Estremamente versatile, infatti può essere utilizzato sia come pHmetro da banco, sia come pHmetro portatile o addirittura montato a parete. Inoltre, è dotato di molte straordinarie funzioni che assicurano precisione e semplicità d'uso.

AMPIO DISPLAY DI FACILE LETTURA

TASTIERA TOUCH

MEMORIA FINO A 1000 DATI



Prezzo Promo

535,00€

SKU: HI2002-02

Preciso ed economico

Funzioni avanzate di calibrazione

Calibrazione pH fino a 5 punti con 7 valori standard e 2 personalizzati. Il sistema CAL Check assicura sempre la corretta calibrazione ed efficienza dell'elettrodo.

Design unico

Il design versatile e lo spessore di 1 cm permettono di utilizzare il pHmetro in modi e ambienti diversi, senza occupare lo spazio di un tradizionale strumento da banco.

Ampio display a colori

Ha uno schermo a cristalli liquidi da 5,5", estremamente chiaro, con angolo di visione di 150 gradi. I valori possono essere letti senza problemi anche a 5 metri di distanza.

Elettrodo digitali intelligenti

Edge utilizza speciali elettrodi digitali dotati di microchip interno, che memorizza informazioni quali: tipo di sensore, serial number e dati di calibrazione.



Elettrodo di qualità superiore

Resistente alle sostanze chimiche

Il corpo in vetro è ideale per l'utilizzo in laboratorio. Il vetro è resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche aggressive ed è facile da pulire.

Lecture rapide

La doppia giunzione di riferimento riduce al minimo il rischio di contaminazione dell'elettrodo. Inoltre, la probabilità di occlusione è ridotta perché la soluzione elettrolitica di riempimento è priva di argento; pertanto, non si formano precipitati che possono ostruire il setto poroso.

Ideale per i laboratori di analisi

La punta sferica è ideale per l'analisi in soluzioni acquose. L'estremità a sfera consente di avere un'ampia superficie di contatto con il campione di misura.

Elettrodi digitali

edge™ utilizza elettrodi digitali, dotati di microchip integrato. Tutti i sensori vengono riconosciuti automaticamente inviano a tutte le informazioni allo strumento. È possibile cambiare elettrodo, senza dover effettuare una nuova calibrazione, poiché i dati calibrazione sono memorizzati nell'elettrodo. Questo garantisce massima flessibilità agli utilizzatori che misurano il pH con più di un elettrodo.



Versatilità a portata di mano

pHmetro da banco

Il supporto da banco in dotazione funziona anche da stazione di ricarica ed è dotato di stativo porta elettrodo con braccio girevole, ideale per una postazione fissa nel laboratorio.

pHmetro portatile

Il suo design sottile e leggero facilitano le misure anche al di fuori del laboratorio, grazie anche alla batteria ricaricabile integrata.

Montaggio a parete

edge™ può essere installato a parete, utilizzando l'apposito supporto in dotazione, liberando così spazio prezioso sul vostro banco di lavoro.



Con Hanna tutto è certificato

Al momento dell'acquisto, assieme allo strumento riceverai anche due certificati di qualità:

- Un certificato di qualità riguardante lo strumento
- Un certificato di qualità riguardante la sonda

Questi documenti attestano che i prodotti rispettano e superano tutti i requisiti qualitativi.

Nel corso del tempo e dell'utilizzo, le caratteristiche e le prestazioni dello strumento tendono a modificarsi. È quindi necessaria una verifica metrologica periodica ed una taratura, per avere la certezza che lo strumento continui a lavorare secondo gli standard di qualità e fornisca quindi valori sempre attendibili.

Contatta i nostri commerciali per richiedere un controllo e una taratura periodica degli strumenti.



Informazioni per l'ordine

edge™ HI 2002-02 (pH/ORP) è fornito completo di: supporto da banco con stativo portaelettrodo, supporto da parete, sonda pH HI11310, soluzioni tampone a pH 4.01 (2 bustine), pH 7.01 (2 bustine) e pH 10.01 (2 bustine), soluzioni di pulizia elettrodo (2 bustine), cavo USB, adattatore corrente, certificato di qualità, chiavetta USB contenente manuale in italiano.



PROMOTION 2

pHmetro da banco con funzionalità avanzate

Il pHmetro da banco HI6221-02 è uno strumento professionale per la misura di pH/ORP, dotato di un ampio display touch screen e funzionalità avanzate. Compatto e facile da usare, questo strumento è ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo accuratezza, ripetibilità e affidabilità.



Prezzo Promo

990,00€

SKU: HI6221-02

Caratteristiche

- Elettrodo pH a doppia giunzione
- Sonda di temperatura HI7662-TW
- Stativo portaelettrodo a braccio flessibile
- Ampie Funzionalità di Misurazione
- Funzione di calibrazione avanzata
- Schermo touchscreen da 7 pollici
- Interfaccia utente intuitiva
- Varie modalità di visualizzazione
- Memorizzazione dati estesa
- Connessione wifi ed ethernet
- Possibilità di creare profili specifici con impostazioni predefinite per diverse matrici
- Sezione tutorial disponibile in ogni momento

Design eccezionale

Ampio schermo

Lo schermo da 7 pollici a colori permette di visualizzare le analisi anche al di fuori della postazione di lavoro.

Touch Screen

Reattivo e preciso nel tocco anche indossando i guanti.

Dimensioni compatte

Le sue dimensioni ridotte non influiscono nelle prestazioni, anzi favoriscono un piano di lavoro ordinato e pulito.



Connettività totale

Connessione alla rete

Lo strumento di può collegare alla rete tramite:


- Wi-fi
- Cavo Ethernet

Registrazione ed Esportazione dei dati

HI6221 raccoglie log fino a 1.000.000 di dati per utente con data e ora dell'analisi.

I dati registrati possono essere poi esportati via:

- Email
- Server Web
- Stampa di rete

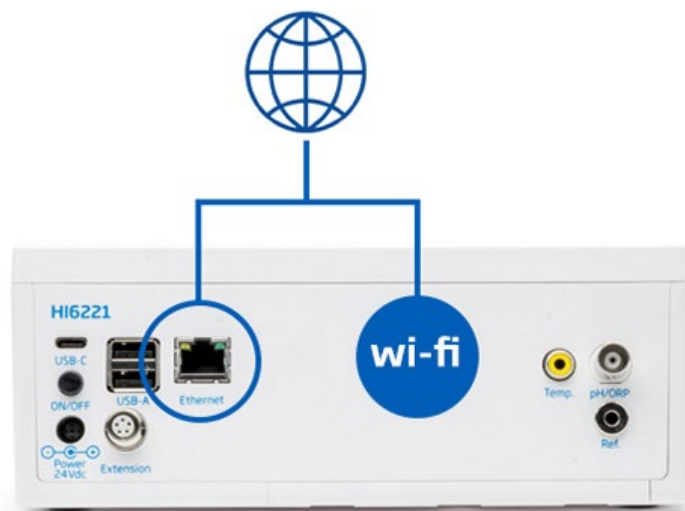

Altamente configurabile

Creazione fino a 9 utenti

È possibile creare:

- Utenti amministratore
- Utenti standard

per accedere al proprio profilo utente è necessaria una password

Creazione di profili

Ogni utente può creare diversi profili.

Un profilo è un'insieme di impostazioni riguardanti:

- Unità di misura
- Calibrazione
- Visualizzazione
- Allarmi

è possibile associare diversi profili a specifici sensori o a diverse matrici



Diverse modalità di visualizzazione

HI6221 permette agli utenti di selezionare la configurazione di visualizzazione preferita:

- Visualizzazione **Base**
- Visualizzazione **GLP semplice**
- Visualizzazione **GLP completa**
- Visualizzazione a **Grafico**
- Visualizzazione a **Tabella**



Ampie Funzionalità di Misurazione

Misure di pH/mV (pH), mV/Rel.mV (ORP), temperatura con possibilità di configurare profili specifici per l'applicazione.

- Misure di pH/mV (pH), mV/Rel.mV (ORP), temperatura
- Possibilità di configurare dei profili specifici per applicazione, che consentono di essere subito pronti per le misure, senza dover aggiornare le impostazioni di sistema e del sensore utilizzato.
- Funzione di registrazione attiva durante le misure
- Indicatore di stabilità della misura (utilizzando l'impostazione Criteri di Stabilità)
- Modalità di lettura: diretta oppure diretta con Autohold
- La compensazione della temperatura automatica (tramite sonda di temperatura) o impostata manualmente
- Messaggi acustici e/o di allarme per misure al di fuori dei limiti predefiniti
- Ingresso delle sonda isolato galvanicamente per evitare interferenze elettriche durante le misure

Guarda il video
su Youtube



Fornitore



www.microtech.eu

Sede Operativa
Traversa III Pisciarelli 18/a
80078 - Pozzuoli (NA)

Sede Legale
Viale Augusto 162,
80125 - Napoli (NA)

microtech@microtech.eu
microtech.srl@pec.it
+39 800 894 119

